

Ideas that work for life

Ambu<sup>®</sup>



## Ambu<sup>®</sup> Larynx-maski

Kertakäyttöinen. Turvallinen. Taloudellinen.

HENGITYSELINHOITO

# Ambu® Larynx-maski

**Kertakäyttöinen.  
Turvallinen.  
Taloudellinen.**

Steriili, kertakäyttöinen, kehittyneempi Ambu maski vähentää huomattavasti ristikontaminaation vaaraa sekä muita riskejä. Lisäksi se on myös edullinen käytössä.


Huippuunsa kehitetyt tuotantomenetelmät mahdollistavat useita ominaisuuksia joita ei ole muissa vastaavissa moni- tai kertakäyttöisissä välineissä. Esimerkiksi Ambu Larynx-maski on taivutettu siten että se myötäilee tarkasti ihmisen luonnollista anatomiaa. Tämä esivalettu kaari on tehty putken sisään, joten maskin nieluun asettaminen on helppoa eikä se vahingoita ylähengitysteitä. Lisäksi erikoismuotoilu varmistaa potilaan pään pysymisen luonnollisessa asennossa selinmakuulla maskin käytön aikana. Putken sisään valetut tukikaaret lisäävät ilmatieputken elastisuutta mukautuen kehon muotoihin ja erilaisiin pään asentoihin.

Ambu Larynx-maskin erityisen pehmeä 0,4 mm cuffi poikkeaa useimmista maskeista, joiden cuffi on oleellisesti paksumpi. Pehmeän cuffin ansiosta voidaan käyttää huomattavasti pienempää sisäistä painetta. Vaikka cuffi on joustava, itse kärki on paksumpi. Putki ei pääse taivuttamaan sisään viettäessä, mikä voisi aiheuttaa sopimattoman asennon ja mahdollisesti vammaa hengitysteihin.


Cuffi, maski ja ilmatieputki muodostavat yhden kiinteän kappaleen. Siksi jokaisen Ambu Larynx-maskin laatu on 100% yhdenmukainen. Tämä ainutlaatuinen valmistustapa takaa ettei cuffin ja putken seinämässä ole epätasaisuuksia tai kohoimia jotka voisivat vahingoittaa potilaan hengitysteiden seinämiä.

Cuffi ja ilmatieputki on valettu yhdeksi kiinteäksi kappaleeksi jossa on sisään rakennettuna anatomisesti oikea käyryys

Ilmatieputken joustava cuffi ja jäykkä liitäntä mahdollistaa vahingoittamattoman sisäänviennin ja poiston

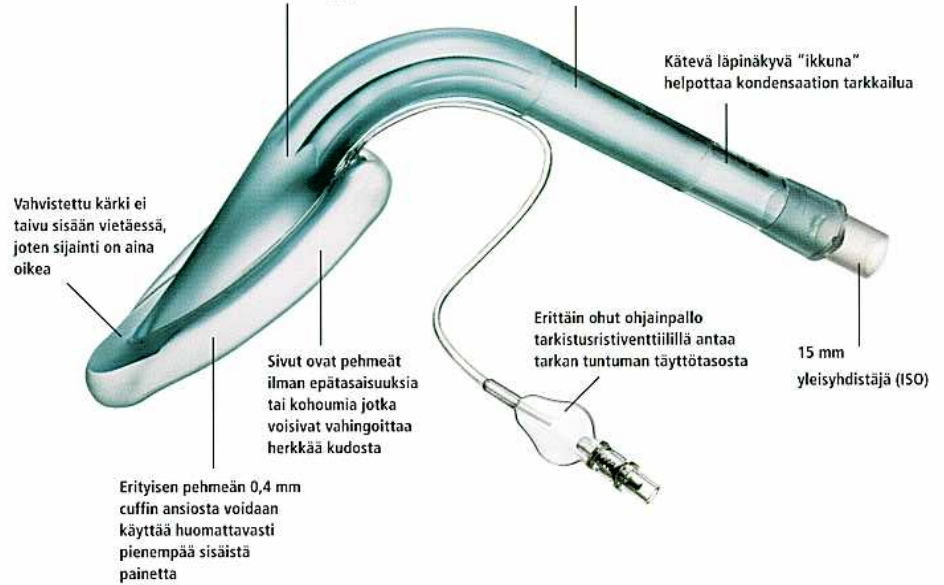

Ambu Larynx-maski Tno.	Koko	Potilaan paino	Max cuffi volyyymi	Max sisäinen cuffi paine	Yhdistäjä	Materiaali	Tyyppi
321 100 000	1	<5 kg	4 ml	60cm H <sub>2</sub> O	15 mm	PVC	Kertakäyttöinen
321 150 000	1½	5-10 kg	7 ml	60cm H <sub>2</sub> O	15 mm	PVC	Kertakäyttöinen
321 200 000	2	10-20 kg	10 ml	60cm H <sub>2</sub> O	15 mm	PVC	Kertakäyttöinen
321 250 000	2½	20-30 kg	14 ml	60cm H <sub>2</sub> O	15 mm	PVC	Kertakäyttöinen
321 300 000	3	30-50 kg	20 ml	60cm H <sub>2</sub> O	15 mm	PVC	Kertakäyttöinen
321 400 000	4	50-70 kg	30 ml	60cm H <sub>2</sub> O	15 mm	PVC	Kertakäyttöinen
321 500 000	5	> 70 kg	40 ml	60cm H <sub>2</sub> O	15 mm	PVC	Kertakäyttöinen

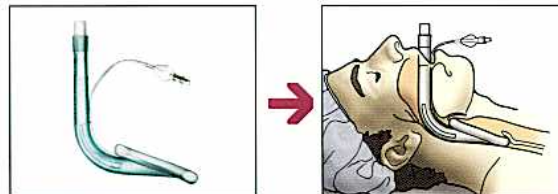

Ambu Larynx-maski on taivutettu siten että se myötäilee tarkasti ihmisen luonnollista anatomiaa. Se varmistaa, että potilaan pää pysyy maskia käytettäessä luonnollisessa asennossa.

**Ambu**

Ambu A/S  
PL 27  
02211 Espoo  
Finland  
Tel: +358 (09)-801 9100  
Fax: +358 (09)-802 5802  
www.ambu.com

